



melekirmak



Sağlık Ürünleri

Laparoskopi Grubu

Laparoscopy Group

Suction Irrigation System




Irrigation Pump



Trocar



Mesh

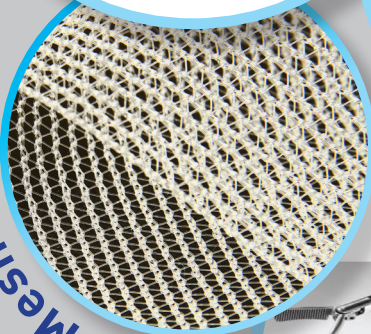

Laparoscopic Instruments



VERES İĞNESİ ÖZELLİKLERİ



- Kolay giriş sağlamak için keskinleştirilmiş uç.

- Kırmızı görsel iğne pozisyon göstergesi.

- İki ebat iğne mevcuttur
- Yüksek akış musluğu mevcuttur.
- Yayı keski sistemi, doku katmanlarından geçerken duyulur klik sesi sağlar.

VERES İĞNESİ

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	PAKETLEME
FVN112000	Veres iğnesi 120 mm	25 Adet/Kutu
FVN115000	Veres iğnesi 150 mm	25 Adet/Kutu

Manufactured by:



www.melekirmek.com - info@melekirmek.com

Distributed by:



Veress Needles

Veress Needles



Spring- loaded styled provides audible "click" when passing through tissue layers.



Red visual needle position indicator.

- Two sizes of veress needle available
- Sharp tip for easy insertion. High flow stopcock.
- Sharp tip for easy insertion. High flow stopcock.

Veress Needles

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGING
FVN112000	Veres iğnesi 120 mm	25 pcs/box
FVN115000	Veres iğnesi 150 mm	25 pcs/box

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:




Monopolar Makas

MONOPOLAR MAKAS ÖZELLİKLERİ

- Paslanmaz çelikten bıçağı işlem süresince keskinliğini sürdürür.
- Düzgün ve hassas kesimler için bıçağı keskinleştirilmiştir.



- 360° dönen bilyesi şaftın 360° rotasyonunu sağlamaktadır.

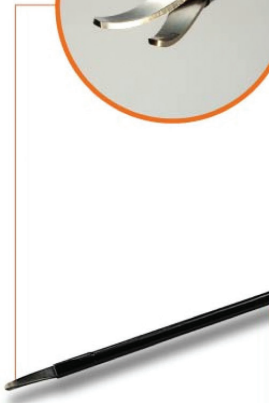

- Genişletilmiş PTFE yalıtımı termal hasar riskini en düşük seviyeye indirir.



- Ergonomik tutuş dizaynı operasyon süresince rahatlık ve ekstra pürüzsüz manipülasyon sağlamaktadır.

MONOPOLAR MAKAS

ÜRÜN KODU

FMS533050

AÇIKLAMA

Monopolar Makas 5mm/33cm

PAKETLEME

5 Adet / Kutu

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Monopolar Scissors

Monopolar Scissors

- Stainless steel blades sustain sharpness throughout the procedure
- Precise & sharp blades ensure smooth cuttings.



- 360° rotation wheel allows the shaft to rotate for 360 degrees



- Extended PTFE insulation reduces the chance of thermal damage

- Ergonomic handle increases comfort during operation.

Monopolar Scissors

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGING
FMS533050	Monopolar Makas 5mm/33cm	5 pcs/box

Manufactured by:




www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Bipolar Kesme Forsepsİ

BİPOLAR KESME FORSEPSİ ÖZELLİKLERİ

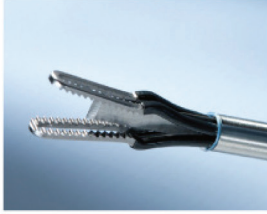

Özel yalıtılmış dişleri ve bıçağı doku yapışmasını kaydadeğer derecede azaltır.



Diş kilitleme dizaynı dokunun güvenli bir şekilde kavramasını sağlar.

BİPOLAR KESME FORSEPSİ

ÜRÜN KODU

FBS133050

AÇIKLAMA

BİPOLAR KESME FORSEPSİ 5 mm / 33 cm

PAKETLEME

5 Adet/Kutu

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:




BIPOLAR CUTTING FORCEPS

BIPOLAR CUTTING FORCEPS

- Multi-functional instrument incorporates grasping, dissecting, transecting, and coagulating functions in one
- Fewer instrument exchanges promote efficiency and reduce procedure time
- Offers various cable options for different bipolar generators



Special coated jaws and blade remarkably reduce tissue adhesion

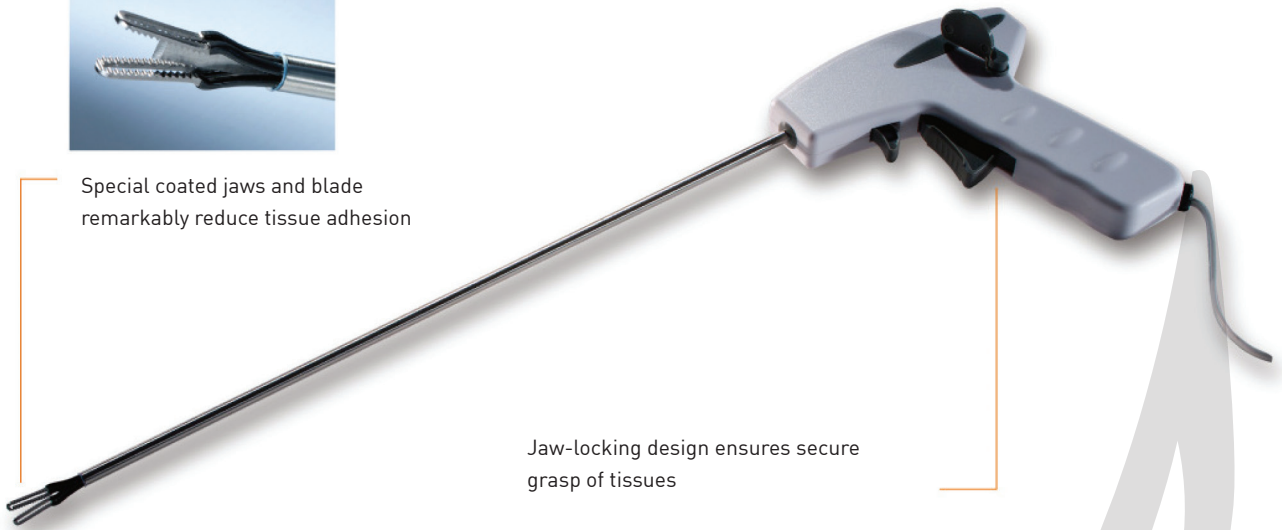

Jaw-locking design ensures secure grasp of tissues

BIPOLAR CUTTING FORCEPS

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGING
FBS133050	BİPOLAR KESME FORSEPSİ 5 mm / 33 cm	5 pcs/box

Manufactured by:



www.melekirmek.com - info@melekirmek.com

Distributed by:



Cerrahi Trocar



GÖRÜNTÜLÜ TROCAR ÖZELLİKLERİ

- Peritona güvenli giriş sağlar.
- Trocara bağlı hasarları en az seviyeye indirir.
- Yaralanmayı en az seviyeye indirir.
- Fasyal kapatmaya gereksinim duyulmaz.
- Daha az acı ve herniasyonu oranı sağlar.

- Çıkarılabilir kanülü spesimenin kolay bir şekilde çıkarılmasını sağlar.



- Şeffaf kanül daha iyi bir görüntüleme sağlar.
- Nervürlü kanül için optimal ek sağlar.



- 5-12 mm.lik el aletleriyle kullanılmasını sağlayan çap düşürücüsü mevcuttur.

- Açık ucu abdominal duvar katmanlarından direkt olarak görüntüleme sağlar



CERRAHİ TROCAR

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	PAKETLEME
FST205070	Otomatik kilitlenen trocar 5mm/7cm	5 Adet/Kutu
FST205100	Otomatik kilitlenen trocar 5mm/10cm	
FST610100	Otomatik kilitlenen trocar çap düşürücülü 10mm/10 cm	
FST612100	Otomatik kilitlenen trocar çap düşürücülü 12mm/10 cm	
FST610150	Otomatik kilitlenen trocar çap düşürücülü 10mm/15cm	5 Adet/Kutu
FST612150	Otomatik kilitlenen trocar çap düşürücülü 12mm/15cm	
FHT610100	Hasson trocar çap düşürücülü 10mm/10cm	5 Adet/Kutu
FHT612100	Hasson trocar çap düşürücülü 12mm/10cm	
FHT305070	Dilating trocar 5mm/7cm	5 Adet/Kutu
FHT305100	Dilating trocar 5mm/10cm	
FHT310100	Dilating trocar 10mm/10cm	
FHT312100	Dilating trocar 12mm/10cm	
FPT505070	Secondary trocar 5mm/7cm- bladeless	5 Adet/Kutu
FPT305070	Bıçaksız trocar 5mm/7cm	5 Adet/Kutu
FPT305100	Bıçaksız trocar 5mm/10cm	
FPT310100	Bıçaksız trocar çap düşürücülü 10mm/10 cm	
FPT312100	Bıçaksız trocar çap düşürücülü 12mm/10 cm	
FVT110100	Görüntülü trocar çap düşürücülü 10mm/10 cm	5 Adet/Kutu
FVT112100	Görüntülü trocar çap düşürücülü 12mm/10 cm	
FTT106070	Thoracic trocar 6mm/7 cm	5 Adet/Kutu
FTT111070	Thoracic trocar 11 mm/7 cm	
FTT113070	Thoracic trocar 13mm/7 cm	
FTT115070	Thoracic trocar 15mm/7 cm	

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:





VISIBLE TROCAR

- Provides safe entry into the peritoneal cavity
- Reduces trocar-related injuries
- Reduces scarring
- No fascial closure is required Less pain and herniation rate



SURGICAL TROCAR

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGING
FST205070	Auto lacking trocar 5mm/7cm	5 pcs/box
FST205100	Auto locking trocar 5mm/10cm	
FST610100	Auto locking trocar with built-in universal seal 10 mm/10 cm	
FST612100	Auto locking trocar with built-in universal seal 12mm/10 cm	
FST610150	Auto locking trocar with built-in universal seal 10mm/15cm	5 pcs/box
FST612150	Auto locking trocar with built-in universal seal 12mm/15cm	
FHT610100	Hasson trocar with built-in universal seal 10mm/10 cm	5 pcs/box
FHT612100	Hasson trocar with built-in universal seal 12mm/10 cm	
FHT305070	Dilating trocar 5mm/7cm	5 pcs/box
FHT305100	Dilating trocar 5mm/10cm	
FHT310100	Dilating trocar 10mm/10cm	
FHT312100	Dilating trocar 12mm/10cm	
FPT505070	Secondary trocar 5mm/7cm- bladeless	5 pcs/box
FPT305070	Bladeless trocar 5mm/7cm	5 pcs/box
FPT305100	Bladeless trocar 5mm/10cm	
FPT310100	Bladeless Iracar with built-in universal seal 10mm/10 cm	
FPT312100	Bladeless Iracar with built-in universal seal 12mm/10 cm	
FVT110100	Visible trocar with built-in universat seal 10mm/10 cm	5 pcs/box
FVT112100	Visible trocar with built-in universat seal 12mm/10 cm	
FTT106070	Thoracic trocar 6mm/7 cm	5 pcs/box
FTT111070	Thoracic trocar 11 mm/7 cm	
FTT113070	Thoracic trocar 13mm/7 cm	
FTT115070	Thoracic trocar 15mm/7 cm	

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Görüntülü Trocar



Görüntülü Trocar

- Peritona güvenli giriş yapmanızı sağlar.
- Trocar hasar riskini azaltır.
- Yara izi bırakmaz.
- Ergonomik tasarımı kolay kullanım sağlar.
- Fasyal kapatma gerektirmez.
- Fıtık oluşumunu önler.



Görüntülü Trocar abdominal katmanlardan geçerken görüntüleme yapmanızı sağlar.

Görüntülü Trocar

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	PAKETLEME
FVT110100	Visible trocar with built-in universal seal 10mm/10cm	5 Adet/Kutu
FVT112100	Visible trocar with built-in universal seal 12mm/10cm	5 Adet/Kutu

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Visible Trocar



Visible Trocar

- Provides safe entry into the peritoneal cavity
- Reduces trocar-related injuries
- Reduces scarring
- Ergonomic handle design ensures ease of insertion
- No fascial closure is required
- Less pain and herniation rate

Unimax visible allows direct visualisation of the abdominal wall layers when the trocar is traversed, which offers a safe and rapid option of primary trocar.

Visible Trocar

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGING
FVT110100	Visible trocar with built-in universal seal 10mm/10cm	5 pcs/box
FVT112100	Visible trocar with built-in universal seal 12mm/10cm	5 pcs/box

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Otomatik Kilitlenen Trocar



OTOMATİK KİLİTLENEN TROCAR

- Kitleme düğmesi mekanizmanın güvenilirliğini,
- Yivli ve transparan kanülü daha iyi görüntülemeyi,
- Evrensel uyumlu olması 5mm ile 12mm arası tüm laparoskopik el aletlerinin girişini,
- Ergonomik tuş tasarımı ve yeterli uzunlukta olması kullanım rahatlığını,
- Düz ve sivri bıçağı ve sivreltilmiş kanülü ile kolay penetrasyonu sağlamaktadır.
- 70 mm ve 100 mm uzun
- 10 mm'lik trocar istek üzerine 5 mm - 11 mm'lik çap düşürücüsü ile üretilebilir.

OTOMATİK KİLİTLENEN TROCAR

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	PAKETLEME
FST205070	Auto locking trocar 5mm/7cm	5 Adet/Kutu
FST205100	Auto locking trocar 5mm/10cm	5 Adet/Kutu
FST610100	Auto locking trocar with built-in universal seal 10mm/10cm	5 Adet/Kutu
FST612100	Auto locking trocar with built-in universal seal 12mm/10cm	5 Adet/Kutu

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Auto-Locking Trocar



Auto-Locking Trocar

- Locking button for safety shield mechanism.
- Clear cannula for better visualization.
- Ribbed cannula for optimal attachment.
- Accommodated with universal seal for the entry of 5-12 mm instruments.
- Ergonomic trocar handle and stopcock with adequate length.
- Sharp flat blade and pointed shield for easy insertion and less fascial trauma.
- Available in short (70 mm) and standard (100 mm) working length and 5mm, 10/11mm, 12mm diameter
- Kit is available for option.
- The 10 mm trocar can be made with 5mm-11mm universal seal upon the requirement.

Auto-Locking Trocar

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGING
FST205070	Auto locking trocar 5mm/7cm	5 pcs/box
FST205100	Auto locking trocar 5mm/10cm	5 pcs/box
FST610100	Auto locking trocar with built-in universal seal 10mm/10cm	5 pcs/box
FST612100	Auto locking trocar with built-in universal seal 12mm/10cm	5 pcs/box

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Bıçaksız Trocar



Unimax bıçaksız trocar yara izini, trocar giriş ağrısını ve fıtık oluşumunu azaltmak üzere dizayn edilmiştir.

Bıçaksız Trocar

- Fasyal kapatma gerektirmez.
- Daha az acı ve hermiasyon oranı sağlar.
- Yara izi kalınlığını önler.
- Transparan kanülü daha net bir görüş açısı sağlar
- Kısa versiyonu (70mm) standart versiyonu (100mm) çalışma uzunluklarında ve 5mm, 10 / 11mm çaplarında mevcuttur.



Bıçaksız Trocar

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	PAKETLEME
FPT305070	Bladeless trocar 5mm/7cm	5 Adet/Kutu
FPT305100	Bladeless trocar 5mm/10cm	5 Adet/Kutu
FPT310100	Bladeless trocar with built-in universal seal 10mm/10cm	5 Adet/Kutu
FPT312100	Bladeless trocar with built-in universal seal 12mm/10cm	5 Adet/Kutu

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Bladeless Trocar



Unimax bladeless trocar is designed to reduce scarring, trocar site pain, and herniaformation.



Bladeless trocar

- No fascial closure is required.
- Less pain and herniation rate
- Reduces scarring
- Clear cannula offers the unobstructed visusalization
- Available in short (70 mm) and standard (100 mm) working lenght and in 5mm, 10/11mm diameters.

Bladeless trocar

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGING
FPT305070	Bladeless trocar 5mm/7cm	5 pcs/box
FPT305100	Bladeless trocar 5mm/10cm	5 pcs/box
FPT310100	Bladeless trocar with built-in universal seal 10mm/10cm	5 pcs/box
FPT312100	Bladeless trocar with built-in universal seal 12mm/10cm	5 pcs/box

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Hasson Trocar

Hasson Trocar

- 10mm, 11mm ve 12 mm çapları mevcuttur.
- Transparan kanülü daha iyi vizüasyon sağlar.
- Giriş kolaylığı trokarın derinliğini ayarlamaya ve cerrahi ipin içeride kalmasına izin verir.
- Kör ucu iç organların zarar uğraması riskini azaltır

Hasson Trocar kapalı ameliyat üzerinden açık operasyon gerçekleştirmek isteyen cerrahlara sunulmuş bir opsiyondur.



Hasson Trocar

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	PAKETLEME
FHT610100	Hasson trocar with built-in universal seal 10mm/10cm	5 Adet/Kutu
FHT612100	Hasson trocar with built-in universal seal 12mm/10cm	5 Adet/Kutu

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Hasson Trocar

Hasson Trocar

- Available in 10/11mm and 12mm diameters
- Clear cannula offers the unobscured visualization.
- Easy to use fixation device allows the adjustment of cannula depth and also the stay of suture.
- Blunt tip reduces the risk of damage to viscera.

Unimax Hasson trocar offers an option for surgeons who prefer the open technique over a closed technique.



Hasson Trocar

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGING
FHT610100	Hasson trocar with built-in universal seal 10mm/10cm	5 pcs/box
FHT612100	Hasson trocar with built-in universal seal 12mm/10cm	5 pcs/box

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Thoracic Trocar



Thoracic Trocar

- Dişli kanülü enstrüman değişimi esnasında stabilite sağlar.
- Kör obtüratör ucu iç yapının hasarını önler.
- 5mm, 10/11 mm, 13mm ve 15mm çaplarında mevcuttur.
- Maliyet düşürücüdür.

Thoracic Trocar

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	PAKETLEME
FTT106070	Thoracic trocar 6mm/7cm	5 Adet/Kutu
FTT111070	Thoracic trocar 11mm/7cm	5 Adet/Kutu
FTT113070	Thoracic trocar 13mm/7cm	5 Adet/Kutu
FTT115070	Thoracic trocar 15mm/7cm	5 Adet/Kutu

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Thoracic Trocar



Thoracic Trocar

- Threaded cannula enhances stability when exchanging instruments.
- Blunt tip opturator prevents the damage of internal structure.
- Available in 5mm, 10/11mm, 13mm, 15mm diameters.
- Cost-effective option.

Thoracic Trocar

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGING
FTT106070	Thoracic trocar 6mm/7cm	5 pcs/box
FTT111070	Thoracic trocar 11mm/7cm	5 pcs/box
FTT113070	Thoracic trocar 13mm/7cm	5 pcs/box
FTT115070	Thoracic trocar 15mm/7cm	5 pcs/box

Manufactured by:



www.melekirmek.com - info@melekirmek.com

Distributed by:




Suction Irrigation Sistem

SUCTION IRRIGATION SİSTEM ÖZELLİKLERİ

- Renk kodlu düğmeleri ve boruları kolay tanıma sağlar.
- Çok çeşitli problemleri her türlü talebe cevap verir.
(28 cm, 33 cm, 45 cm uzunlukları ve 5mm, 10mm, çapları mevcuttur.)

- Tek yönlü valfi reflüden gelen tuzu engeller.

- Yivli prob dizaynı hasarı önler.

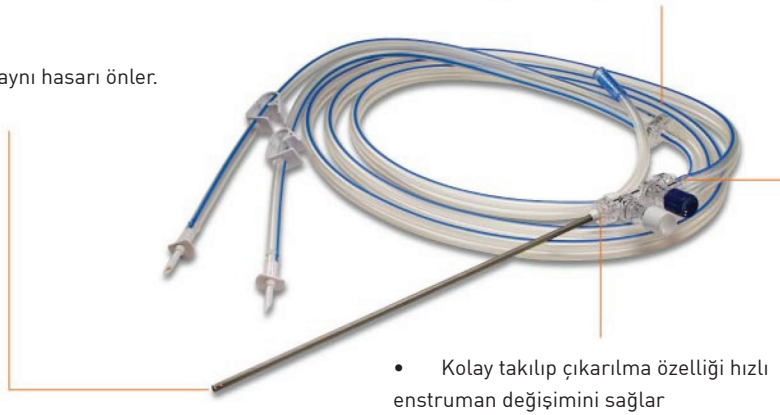

- Ergonomik tutuş tasarımı her iki ellede kullanımı sağlar
- Tutuş kısmının ekstra düzgün hareket etme özelliği yorulmayı önler
- Şeffaf tutuş kısmı daha net bir görüntü sağlar

- Kolay takılıp çıkarılma özelliği hızlı enstrüman değişimini sağlar

EMME KANALLI ELEKTROTLAR



L kanca



Spatül



Elektrot düğmeli



Needle electrode

SUCTION IRRIGATION SİSTEM

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	PAKETLEME
FSI133050	Suction irrigation set 5mm/33cm	10 Set/Kutu
FSI128050	Suction irrigation set 5mm/28cm	
FSI145050	Suction irrigation set 5mm/45cm	
FSI633050	Suction irrigation set 5mm/33cm with L hook	
FSI833050	Suction irrigation set 5mm/33cm with spatula	10 Set/Kutu
FSI533050	Suction irrigation set 5mm/33cm with button electrode	
1PB105280	Disposable probe for S/I set 5mm/28cm	10 Adet/Kutu
1PB105330	Disposable probe for S/I set 5mm/33cm	
1PB105450	Disposable probe for S/I set 5mm/45cm	
1PB110330	Disposable probe for S/I set 10mm/33cm	
1PB405330	Reusable probe for S/I set 5mm/33cm	10 Adet/Kutu
1PB405450	Reusable probe for S/I set 5mm/45cm	
1PB410330	Reusable probe for S/I set 10mm/33cm	
FSA205330	Monopolar L hook for S/I set 5mm/33cm	10 Adet/Kutu
FSA305330	Monopolar spatula probe for S/I set 5mm/33cm	
FSA505330	Monopolar button electrode probe for S/I set 5mm/33cm	
FSAN05330	Monopolar needle probe for S/I set 5mm/33cm	

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com


Distributed by:



Suction Irrigation System

SUCTION IRRIGATION SYSTEM

- Various probes meet all kinds of demands.
- Color coded buttons and tubings for easy identification.
- Chamfered probe desing reduces damage
- One way valve prevents the saline from refluxing.

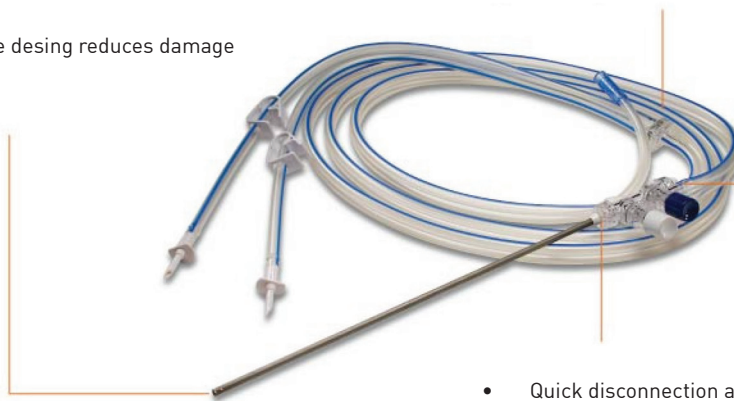

- Ergonomically designed handpiece can be operated by either hand.
- Extra Smooth movement of the handpiece prevents fatigue
- Clear handpiece for unobstructed visualization.

- Quick disconnection allows easy exchange of instrumentation.

Electrodes With Suction Channel



L hook



Spatula



Button electrode



Needle electrode

SUCTION IRRIGATION SİSTEM

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGING
FSI133050	suction irrigation set 5mm/33cm	10 Set/Kutu
FSI128050	Suction irrigation set 5mm/28cm	
FSI145050	Suction irrigation set 5mm/45cm	
FSI633050	Suction irrigation set 5mm/33cm with L hook	
FSI833050	Suction irrigation set 5mm/33cm with spatula	10 Set/Kutu
FSI533050	Suction irrigation set 5mm/33cm with button electrode	
1PB105280	Disposable probe for S/I set 5mm/28cm	10 Adet/Kutu
1PB105330	Disposable probe for S/I set 5mm/33cm	
1PB105450	Disposable probe for S/I set 5mm/45cm	
1PB110330	Disposable probe for S/I set 10mm/33cm	
1PB405330	Reusable probe for S/I set 5mm/33cm	10 Adet/Kutu
1PB405450	Reusable probe for S/I set 5mm/45cm	
1PB410330	Reusable probe for S/I set 10mm/33cm	
FSA205330	Monopolar L hook for S/I set 5mm/33cm	10 Adet/Kutu
FSA305330	Monopolar spatula probe for S/I set 5mm/33cm	
FSA505330	Monopolar button electrode probe for S/I set 5mm/33cm	
FSAN05330	Monopolar needle probe for S/I set 5mm/33cm	

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Suction Irrigasyon Setleri İçin Tasarlanmış Problar



Suction Irrigasyon Setleri İçin Tasarlanmış Problar

- 28cm, 33cm ve 45cm uzunluklarında, 5 mm ve 10 mm çaplarında hizmetinize sunulmuştur.
- Elektrocerrahi problemleri L kanca ve spatül mevcuttur.
- Kör ucu doku hasarını azaltır.

Suction Irrigasyon Setleri İçin Tasarlanmış Problar

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	PAKETLEME
1PB105280	Disposable probe for S/I set 5mm/28cm	20 Adet/Kutu
1PB105330	Disposable probe for S/I set 5mm/33cm	20 Adet/Kutu
1PB105450	Disposable probe for S/I set 5mm/45cm	20 Adet/Kutu
1PB110330	Disposable probe for S/I set 10mm/33cm	20 Adet/Kutu
1PB405330	Reusable probe for S/I set 5mm/33cm	20 Adet/Kutu
1PB405450	Reusable probe for S/I set 5mm/45cm	20 Adet/Kutu
1PB410330	Reusable probe for S/I set 10mm/33cm	20 Adet/Kutu
FSA205330	Monopolar L hook for S/I set 5mm/33cm	20 Adet/Kutu
FSA305330	Monopolar Spatula for S/I set 5mm/33cm	20 Adet/Kutu

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Probes For Suction Irrigation Set



Probes for Suction Irrigation set

- Available in 28cm, 33 cm, 45 cm working length and 5mm, 10mm diameter.
- Electrosurgical probe L hook and spatula are available
- Blunt tip probe reduces tissue damage

Probes for Suction Irrigation set

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGING
1PB105280	Disposable probe for S/I set 5mm/28cm	20 pcs/box
1PB105330	Disposable probe for S/I set 5mm/33cm	20 pcs/box
1PB105450	Disposable probe for S/I set 5mm/45cm	20 pcs/box
1PB110330	Disposable probe for S/I set 10mm/33cm	20 pcs/box
1PB405330	Reusable probe for S/I set 5mm/33cm	20 pcs/box
1PB405450	Reusable probe for S/I set 5mm/45cm	20 pcs/box
1PB410330	Reusable probe for S/I set 10mm/33cm	20 pcs/box
FSA205330	Monopolar L hook for S/I set 5mm/33cm	20 pcs/box
FSA305330	Monopolar Spatula for S/I set 5mm/33cm	20 pcs/box

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Laparoskopik Elektrot



Laparoskopik Elektrot

- Ergonomik tutuş tasarımı kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
- Şaftından kanca kısmına kadar yüksek kalitede yalıtımlanmıştır.
- Daha uzun soluklu ve kusursuz koagülasyon sağlar.
- Üç farklı uç dizaynı mevcuttur: L kancalı, J kancalı ve Spatü

Laparoskopik Elektrot

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	PAKETLEME
FPL133050	Monopolar L hook probe 5mm/33cm	5 Adet/Kutu
FPL133051	Monopolar L hook probe 5mm/33cm with cable	5 Adet/Kutu
FPJ133050	Monopolar J hook probe 5mm/33cm	5 Adet/Kutu
FPJ133051	Monopolar J hook probe 5mm/33cm with cable	5 Adet/Kutu
FPS133050	Monopolar spatula probe 5mm/33cm	5 Adet/Kutu
FPS133051	Monopolar spatula probe 5mm/33cm with cable	5 Adet/Kutu

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Laparoscopic Electrodes



Laparoscopic Electrodes

- Ergonomic handle design
- High quality isolation tube isolated all the way down the hook.
- Enables a lasting and precise coagulation
- Three different tip designs: L hook, J hook, spatula

Laparoscopic Electrodes

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGING
FPL133050	Monopolar L hook probe 5mm/33cm	5 pcs/box
FPL133051	Monopolar L hook probe 5mm/33cm with cable	5 pcs/box
FPJ133050	Monopolar J hook probe 5mm/33cm	5 pcs/box
FPJ133051	Monopolar J hook probe 5mm/33cm with cable	5 pcs/box
FPS133050	Monopolar spatula probe 5mm/33cm	5 pcs/box
FPS133051	Monopolar spatula probe 5mm/33cm with cable	5 pcs/box

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Monopolar Kablo

MONOPOLAR KABLO ÖZELLİKLERİ

- Yüksek kalite kablo izolasyonu.
- Tek kullanımlık ve tekrar kullanımlık kablolar mevcuttur.
- Maliyet düşürücüdür.



8 mm

4 mm

8 mm tekrar kullanılabilir.

MONOPOLAR KABLO

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	PAKETLEME
FDC132080	Disposable monopolar cable with 8mm banana connector	40 Adet/Kutu
FDC232080	Disposable monopolar cable with 4mm banana connector	40 Adet/Kutu
1RC132080	Reusable monopolar cable with 8mm banana connector	20 Adet/Kutu

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Monopolar Cables

Monopolar Cables

- High quality cable insulation.
- Both disposable and reusable cables are available.
- Cost-effective.



8 mm

4 mm

8 mm reusable

Monopolar Cables

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGING
FDC132080	Disposable monopolar cable with 8mm banana connector	40 pcs/box
FDC232080	Disposable monopolar cable with 4mm banana connector	40 pcs/box
1RC132080	Reusable monopolar cable with 8mm banana connector	20 pcs/box

Manufactured by:



www.melekirmek.com - info@melekirmek.com

Distributed by:



İrigasyon Pompası

İRİGASYON POMPASI ÖZELLİKLERİ

- Tekli olarak 1 lt'lik ve dual olarak 1 lt'lik pompalama sistemi mevcuttur.
- Gürültüsüz çalışır.
- Kullanımı kolaydır.
- Zamandan tasarruf eder.

Kilitlenebilir basınç ayarlama düğmesi.



Açma kapama düğmesi.

İRİGASYON POMPASI

ÜRÜN KODU

1PP110000

AÇIKLAMA

Irrigation pump (reusable)

PAKETLEME

1 Adet/Kutu

Manufactured by:

**UNIMAX**
UNIMAX MEDICAL SYSTEMS INC.
Made in: Taiwan

www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:

**melekirmak**
Medical Products

Irrigation Pump

Irrigation Pump

- Available in single 1 liter and dual 1 liter pump system
- Noise free
- Easy to operate
- Reduces O.R. time

- Locking pressure adjustment knob



Turn on-off knob

Irrigation Pump

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGING
1PP110000	Irrigation pump (reusable)	1 pcs/box

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com


Distributed by:



İnsüflasyon Boru Seti

İNSÜFLASYON BORU SETİ ÖZELLİKLERİ

- Birçok aletle uyumlu
- 0,02 micron yüksek kaliteli filtresi
- Kink yapmayan özel hortumu
- Altı farklı konnektör opsiyonu

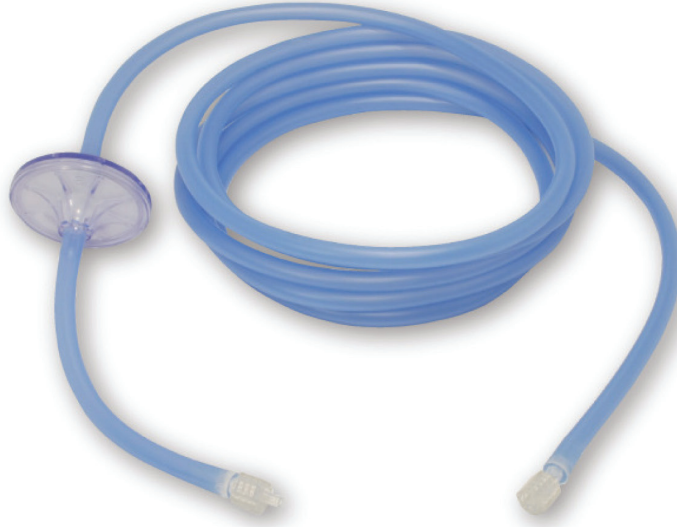

15 mm konnektör
(Wolf / Storz)



22 mm konnektör
(Linvatec)



Click-in adaptör
(Stryker)



Halka adaptör
(Smith Nephew)



Luer Lock



15 / 22 mm konnektör

BİPOLAR KESME FORSEPSİ

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	PAKETLEME
FIF231500	Insufflation tubing set with luer lock	10 Adet/Kutu
FIF231510	Insufflation tubing set with O ring adaptor	10 Adet/Kutu
FIF231520	Insufflation tubing set with click-in adaptor	10 Adet/Kutu
FIF231530	Insufflation tubing set with 15 mm round connector	10 Adet/Kutu
FIF231540	Insufflation tubing set with 22 mm round connector	10 Adet/Kutu
FIF231550	Insufflation tubing set with 15/22 mm round connector	10 Adet/Kutu

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com


Distributed by:



Insufflation Tubing Set

INSUFFLATION TUBING SET

- Compatible with most equipments
- Filter made of membrane: 0.02 micron high quality filter (99.9999% filtration efficiency)
- Adequate hardness of the tubing prevents kinking
- Medical grade material used
- Six different connectors for options

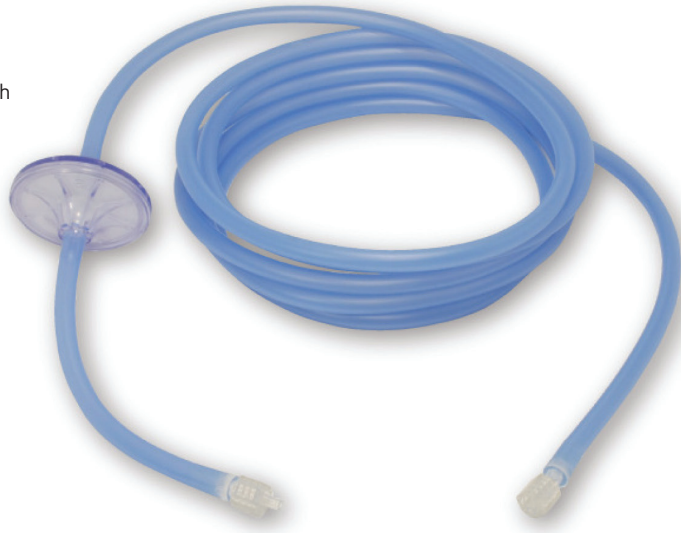

15mm connector
(Wolf / Storz)



22mm connector
(Linvatec)



Click-in adaptor
(Stryker)



O ring adaptor
(Smith Nephew)



Luer Lock



15 / 22 mm
connector

INSUFFLATION TUBING SET

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGING
FIF231500	Insufflation tubing set with luer lock	10 pcs/box
FIF231510	Insufflation tubing set with O ring adaptor	10 pcs/box
FIF231520	Insufflation tubing set with click-in adaptor	10 pcs/box
FIF231530	Insufflation tubing set with 15 mm round connector	10 pcs/box
FIF231540	Insufflation tubing set with 22 mm round connector	10 pcs/box
FIF231550	Insufflation tubing set with 15/22 mm round connector	10 pcs/box

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Duman Tahliye Hortumu

DUMAN TAHLİYE HORTUMU ÖZELLİKLERİ

Duman tahliye hortumu laparoskopik işlemlerde oluşan dumanın kolayca dışarı atılmasını sağlar aynı zamanda cerrahi personelin dumandan etkilenmesini önler.



- 0,1 mikronda 99,999995% etkilidir.
- Duman filtresi ve aktif karbon dahil edilmiştir.
- Bir cerrahi işlem boyunca etkilidir.
- Bakteriyel ve viral kontrol mevcuttur.
- Kullanımı kolaydır.

DUMAN TAHLİYE HORTUMU

ÜRÜN KODU

FSE105000

AÇIKLAMA

Smoke evacuation tubing

PAKETLEME

10 Adet/Kutu

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Smoke Evacuation Tubing

Smoke Evacuation Tubing

Unimax smoke evacuation tubing offers a simple solution to the removal of smoke caused during laparoscopic procedures. It can not only evacuate smoke efficiently but provide effective protection to the surgical staff.



- 99,999995% efficient of 0,1 micron particles.
- Lasts throughout a surgical procedure
- Best bacterial and viral control available
- Easy to use.

Smoke Evacuation Tubing

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGING
FSE105000	Smoke evacuation tubing	10 pcs/box

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Suction Liner Sistemi

SUCTION LINER SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ



Kapatma vanası.

- Bakteri filtresi ve kapatma vanası ile hastaları ve hastane cihazlarının daha iyi korunmasını sağlar.
- Tamamen kapalı ve kompakt dayanıklılığı ile güvenlik sağlar.
- Tekli olarak duvar askısında ya da mobil suction kartının tandeminde kullanılır.
- Renk kodlamalı kapağı ile kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
- Polietilenden üretildiği için çevre dostudur.

SUCTION LINER SİSTEMİ

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	PAKETLEME
SL-1500	Disposable suction liner 1500 c.c. (white lid)	50 Adet/Kutu
SL-1500S	Disposable suction liner 1500 c.c. with shutoff valve (blue lid)	50 Adet/Kutu
SL-2000	Disposable suction liner 2000 c.c. (white lid)	50 Adet/Kutu
SL-2000S	Disposable suction liner 2000 c.c. with shutoff valve (blue lid)	50 Adet/Kutu
SL-1500CH	Reusable outer canister 1500 c.c.	40 Adet/Kutu
SL-2000CH	Reusable outer canister 2000 c.c.	16 Adet/Kutu

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Suction Liner System

Suction Liner System



- Protection devices: with bacteria filter and shut off valve for better protection of patients and hospital device
- Safe: completely sealed and compact endurance
- Versatile: it can be used individually in the wall plate or used in tandem in the mobile suction cart (2-4 units)
- User friendly: color coded lid to determine the connection of suction liners when used in mobile suction cart
- Environmentally friendly: polyethylene used

Suction Liner System

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGING
SL-1500	Disposable suction liner 1500 c.c. (white lid)	50 pcs/box
SL-1500S	Disposable suction liner 1500 c.c. with shutoff valve (blue lid)	50 pcs/box
SL-2000	Disposable suction liner 2000 c.c. (white lid)	50 pcs/box
SL-2000S	Disposable suction liner 2000 c.c. with shutoff valve (blue lid)	50 pcs/box
SL-1500CH	Reusable outer canister 1500 c.c.	40 pcs/box
SL-2000CH	Reusable outer canister 2000 c.c.	16 pcs/box

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Laparoskopik El Aletleri

LAPAROSKOPIK EL ALETLERİ ÖZELLİKLERİ

- Rotasyon bilyesi shaftın 360° dönmesine olana sağlamaktadır.
- Tutulan kısmın arka kısmında yer alan monopolar kablo girişi.



- Ergonomik tutuş tasarımı işlem sırasında rahatlık sağlar.
- Kolay deklanşör mandal dizaynı.



Duckbill grasper



Grasper



Clinch



Rat tooth



Dissector



Babcock



Johan

LAPAROSKOPIK EL ALETLERİ

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	PAKETLEME
FEG233050	Düz grasping forceps 5mm/33cm	5 Adet/Kutu
FDG233050	Duckbill grasping forceps 5mm/33cm	5 Adet/Kutu
FED233050	Maryland dissecting forceps 5mm/33cm	5 Adet/Kutu
FEC233050	Clinch grasping forceps 5mm/33cm	5 Adet/Kutu
FEB233050	Babcock grasping forceps 5mm/33cm	5 Adet/Kutu
FRT233050	Rat tooth grasping forceps 5mm/33cm	5 Adet/Kutu
FDG233050	Duckbill grasping forceps 5mm/33cm	5 Adet/Kutu
FEJ233050	Johan grasping forceps 5mm/33cm	5 Adet/Kutu
FRJ23305A	Johan grasping forceps 5mm/33cm	5 Adet/Kutu

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com



Distributed by:



Laparoscopic Grasping Instruments

LAPAROSCOPIC GRASPING INSTRUMENTS

- 360 ° rotation wheel allows 360° shaft rotation.
- Monopolar cable connector in the rear of the handle.

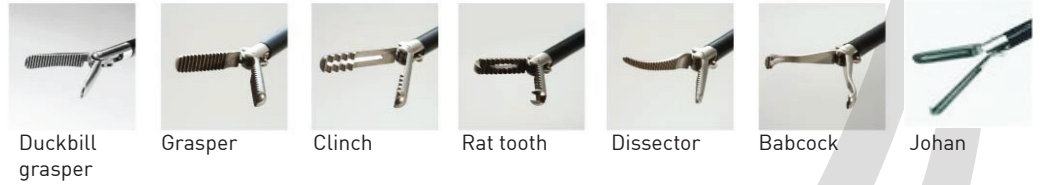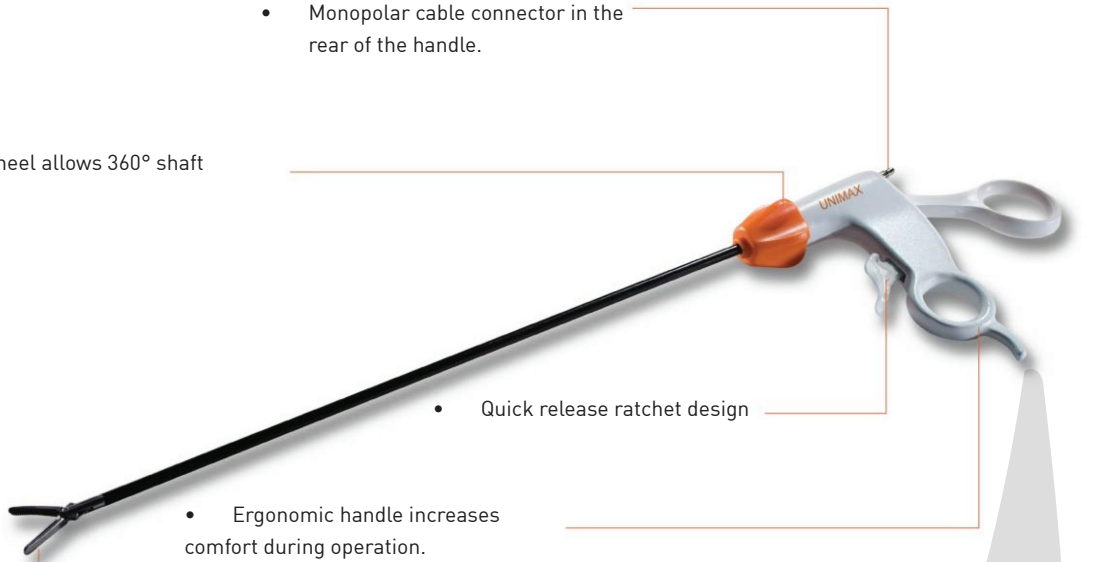

GRASPING FORCEPS

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGING
FEG233050	Straight grasping forceps 5mm/33cm	5 Adet/Kutu
FDG233050	Duckbill grasping forceps 5mm/33cm	5 Adet/Kutu
FED233050	Maryland dissecting forceps 5mm/33cm	5 Adet/Kutu
FEC233050	Clinch grasping forceps 5mm/33cm	5 Adet/Kutu
FEB233050	Babcock grasping forceps 5mm/33cm	5 Adet/Kutu
FRT233050	Rat tooth grasping forceps 5mm/33cm	5 Adet/Kutu
FDG233050	Duckbill grasping forceps 5mm/33cm	5 Adet/Kutu
FEJ233050	Johan grasping forceps 5mm/33cm	5 Adet/Kutu
FRJ23305A	Johan grasping forceps 5mm/33cm	5 Adet/Kutu



Babcock

- Rotasyon bilyesi şaftın 360° dönmesine olana sağlamaktadır.
- Kolay deklanşör mandal dizaynı isteğe göre mevcuttur.
- Ergonomik tutuş tasarımı işlem sırasında rahatlık sağlar.
- Tutulan kısmın arka kısmında yer alan monopolar kablo girişi.

MELEKIRMAK MONOLENE MESH

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	PAKETLEME
FEB133050	Babcock grasping forceps 5mm/33cm	5 Adet/Kutu

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:





Babcock

- Ergonomic handle increases comfort during operation.
- 360° rotation wheel allows the shaft to rotate for 360 degrees.
- Ratchet available.

MELEKIRMAK MONOLENE MESH

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGING
FEB133050	Babcock grasping forceps 5mm/33cm	5 pcs/box

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Clinch



Clinch

- Rotasyon bilyesi şaftın 360° dönmesine olana sağlamaktadır.
- Kolay deklanşör mandal dizaynı isteğe göre mevcuttur.
- Ergonomik tutuş tasarımı işlem sırasında rahatlık sağlar.
- Tutulan kısmın arka kısmında yer alan monopolar kablo girişi.

Clinch

ÜRÜN KODU

FEC133050

AÇIKLAMA

Clinch grasping forceps 5mm/33cm

PAKETLEME

5 Adet/Kutu

Manufactured by:

 **UNIMAX**
UNIMAX MEDICAL SYSTEMS INC.
Made in: Taiwan

www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:

 **melekirmak**
Medical Products

Clinch



Clinch

- Ergonomic handle increases comfort during operation.
- 360° rotation wheel allows the shaft to rotate for 360 degrees.
- Ratchet available.

Clinch

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGING
FEC133050	Clinch grasping forceps 5mm/33cm	5 pcs/box

Manufactured by:



www.melekirmek.com - info@melekirmek.com

Distributed by:



Dissector



Dissector

- Rotasyon bilyesi şaftın 360° dönmesine olana sağlamaktadır.
- Kolay deklanşör mandal dizaynı isteğe göre mevcuttur.
- Ergonomik tutuş tasarımı işlem sırasında rahatlık sağlar.
- Tutulan kısmın arka kısmında yer alan monopolar kablo girişi.

Dissector

ÜRÜN KODU

FED133050

AÇIKLAMA

Maryland dissecting forceps 5mm/33cm

PAKETLEME

5 Adet/Kutu

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Dissector



Dissector

- Ergonomic handle increases comfort during operation.
- 360° rotation wheel allows the shaft to rotate for 360 degrees.

Dissector

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGING
FED133050	Maryland dissecting forceps 5mm/33cm	5 pcs/box

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Grasper



Grasper

- Rotasyon bilyesi şaftın 360° dönmesine olana sağlamaktadır.
- Kolay deklanşör mandal dizaynı isteğe göre mevcuttur.
- Ergonomik tutuş tasarımı işlem sırasında rahatlık sağlar.
- Tutulan kısmın arka kısmında yer alan monopolar kablo girişi.

Grasper

ÜRÜN KODU

FEG133050

AÇIKLAMA

Straight grasping forceps 5mm/33cm

PAKETLEME

5 Adet/Kutu

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Grasper



Grasper

- Ergonomic handle increases comfort during operation.
- 360° rotation wheel allows the shaft to rotate for 360 degrees.
- Ratchet available.

Grasper

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGING
FEG133050	Straight grasping forceps 5mm/33cm	5 pcs/box

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Rat Tooth



Rat Tooth

- Rotasyon bilyesi şaftın 360° dönmesine olana sağlamaktadır.
- Kolay deklanşör mandal dizaynı isteğe göre mevcuttur.
- Ergonomik tutuş tasarımı işlem sırasında rahatlık sağlar.
- Tutulan kısmın arka kısmında yer alan monopolar kablo girişi.

Rat Tooth

ÜRÜN KODU

FRT133050

AÇIKLAMA

Rat tooth grasping forceps 5mm/33cm

PAKETLEME

5 Adet/Kutu

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Rat Tooth



Rat Tooth

- Ergonomic handle increases comfort during operation.
- 360° rotation wheel allows the shaft to rotate for 360 degrees.
- Ratchet available.

Rat Tooth

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGING
FRT133050	Rat tooth grasping forceps 5mm/33cm	5 pcs/box

Manufactured by:



www.melekirmek.com - info@melekirmek.com

Distributed by:





Johan

- Rotasyon bilyesi şaftın 360° dönmesine olana sağlamaktadır.
- Kolay deklanşör mandal dizaynı isteğe göre mevcuttur.
- Ergonomik tutuş tasarımı işlem sırasında rahatlık sağlar.
- Tutulan kısmın arka kısmında yer alan monopolar kablo girişi.

Rat Tooth

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	PAKETLEME
FEJ233050	Johan grasping forceps 5mm/33cm	5 Adet/Kutu
FRJ23305A	Johan grasping forceps 5mm/33cm	5 Adet/Kutu

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:





Johan

- Ergonomic handle increases comfort during operation.
- 360° rotation wheel allows the shaft to rotate for 360 degrees.
- Ratchet available.

Rat Tooth

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGING
FEJ233050	Johan grasping forceps 5mm/33cm	5 Adet/Kutu
FRJ23305A	Johan grasping forceps 5mm/33cm	5 Adet/Kutu

Manufactured by:



www.melekirmek.com - info@melekirmek.com

Distributed by:



Endo Poşet Serisi



- Endo poşet introcer ile



- Endo poşet sütün ile



- Endo poşet hafıza teli ile

AYRILABİLİR ENDO POŞETİN FAYDALARI

Çıkarılabilir endo poşet patentli bir alettir. Endo poşetin uygulanmasının daha kolay ve daha hızlı olmasını sağlar. Bu özel dizayn endo poşetin introducerdan ayrılıp hastanın vücudunda işlem sırasında kalmasını sağlar. Böylelikle işlem zamanı kısaltılmış olur.

- Bu özel patentli dizayn kullanım kolaylığını sağlar.
- 10 mm lik introducer giriş kolaylığını sağlar.
- Kendi kendine açılan dizayn spesimenin kolay ve güvenli bir şekilde alınmasını sağlar.
- Yüksek dayanıklılık gücüne sahip olan PU poşet materyali sızıntıyı önler.
- Endo poşetin çevreleyen metal halka spesimeni alırken doğru pozisyonlama sağlar.



ENDO POŞET

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	PAKETLEME
FEP136080	Endo Poşet İntroducer ile 3"*6"	20 Adet/Kutu
FEP157080	Endo Poşet İntroducer ile 5"*7"	20 Adet/Kutu
FEP736080	Endo Poşet Sütün ile 3"*6"	20 Adet/Kutu
FEP757080	Endo Poşet Sütün ile 5"*7"	20 Adet/Kutu
FEP836080	Endo Poşet Hafıza Teli ile 3"*6"	10 Adet/Kutu
FEP857080	Endo Poşet Hafıza Teli ile 5"*7"	10 Adet/Kutu
FEP936100	Ayrılabilir Endo Poşet 3"*6"	5 Adet/Kutu
FEP957100	Ayrılabilir Endo Poşet 5"*7"	5 Adet/Kutu

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Endo Pouches



- Endo pouch with introducer



- Endo pouch with suture tie



- Endo pouch with memori wire

Endo Pouches

- Three models are available to meet various demands
- High strength PU pouch material assures no leakage
- Tapered bag desing for easier removal
- 10mm cost-effective solutions



Endo Pouches

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGING
FEP136080	Endo Poşet İntroducer ile 3"*6"	20 pcs/box
FEP157080	Endo Poşet İntroducer ile 5"*7"	20 pcs/box
FEP736080	Endo Poşet Sütür ile 3"*6"	20 pcs/box
FEP757080	Endo Poşet Sütür ile 5"*7"	20 pcs/box
FEP836080	Endo Poşet Hafıza Teli ile 3"*6"	10 pcs/box
FEP857080	Endo Poşet Hafıza Teli ile 5"*7"	10 pcs/box
FEP936100	Ayrılabilir Endo Poşet 3"*6"	5 pcs/box
FEP957100	Ayrılabilir Endo Poşet 5"*7"	5 pcs/box

Manufactured by:



www.melekirmek.com - info@melekirmek.com

Distributed by:



Çıkarılabilir Endo Poşet



Unimax çıkarılabilir endo poşet daha kolay ve daha hızlı uygulama sağlayan patetntli bir üründür. Bu özel dizaynıyla introducer'den ayrılarak işlem sırasında hastanın vücudunda kalır. Böylelikle yapılan işlemin kolaylığı ve işlem süresinin tasarrufunu sağlar.

Çıkarılabilir Endo Poşet

- Özel patentli dizaynı kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
- 10 mm'lik introducer'i kolay giriş sağlar.
- Kendiliğinden açılan poşet dizaynı kolay ve güvenli bir şekilde spesimenin alımını sağlar
- Sağlam PU poşet materyali sızıntıyı önler.
- Poşeti çevreleyen metal halkası işlem sırasında spesimen, n doğru bir şekilde alınmasını sağlar.



Çıkarılabilir Endo Poşet

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	PAKETLEME
FEP936100	Detachable endo pouch 3" x 6"	5 Adet/Kutu
FEP957100	Detachable endo pouch 5" x 7"	5 Adet/Kutu

Manufactured by:




www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Detachable Endo Pouch

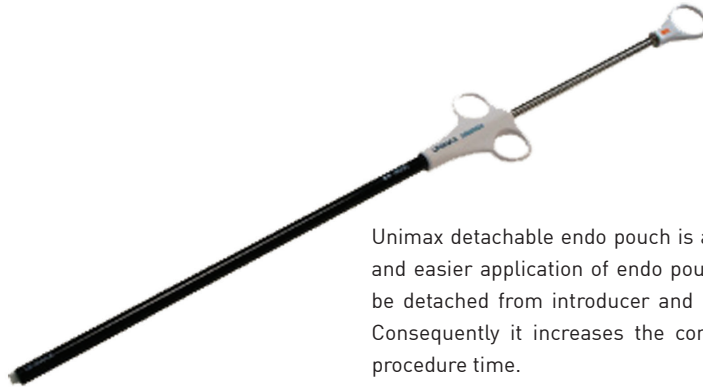

Unimax detachable endo pouch is a patented device which provides a quicker and easier application of endo pouch. This unique design allows the pouch to be detached from the introducer and left within the patient's body during the procedure. Consequently, it increases the convenience of the procedure and shortens the procedure time.

Detachable endo pouch

- Unique patented design ensures ease of use
- 10mm introducer provides ease of insertion
- Self-opening pouch design provides easy and safe specimen capture
- High strength PU pouch material assures no leakage
- Enhanced metal ring ensures large pouch opening and keeps the pouch in place when loading specimen



Detachable endo pouch

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGING
FEP936100	Detachable endo pouch 3" x 6"	5 pcs/box
FEP957100	Detachable endo pouch 5" x 7"	5 pcs/box

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Endo Poşetler



İntroducerli endo poşet



Süurlu endo poşet



Hafıza telli endo poşet

Endo Poşetler

- Bu üç model farklı taleplere cevap verebilmek üzere dizayn edilmiştir.
- Sağlam PU materyalinden imal edilmiş poşeti sızıntıyı önler.
- Konik şekilde dizayn edilmiş poşeti spesimenin kolay çıkarılığını sağlar.
- Maliyet düşürücüdür.

Endo Poşetler

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	PAKETLEME
FEP136080	Endo pouch with introducer 3" x 6"	20 Adet/Kutu
FEP157080	Endo pouch with introducer 5" x 7"	20 Adet/Kutu
FEP736080	Endo pouch with suture tie 3" x 6"	20 Adet/Kutu
FEP757080	Endo pouch with suture tie 5" x 7"	20 Adet/Kutu
FEP836080	Endo pouch with memory wire 3" x 6"	5 Adet/Kutu
FEP857080	Endo pouch with memory wire 5" x 7"	5 Adet/Kutu

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Endo Pouches



Endo poch with introducer



Endo poch with suture tie



Endo poch with memory wire

Endo pouches

- Three models are available to meet various demands
- High strength PU poch material assures no leakage
- Tapered bag design for easier removal
- 10mm introducer provides ease of insertion
- The cost-effective solution

Endo pouches

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGING
FEP136080	Endo pouch with introducer 3" x 6"	20 pcs/box
FEP157080	Endo pouch with introducer 5" x 7"	20 pcs/box
FEP736080	Endo pouch with suture tie 3" x 6"	20 pcs/box
FEP757080	Endo pouch with suture tie 5" x 7"	20 pcs/box
FEP836080	Endo pouch with memory wire 3" x 6"	5 pcs/box
FEP857080	Endo pouch with memory wire 5" x 7"	5 pcs/box

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:




Kamera Kılıfı

KAMERA KILIFI ÖZELLİKLERİ

Tek kullanımlık kamera kılıfları farklı ihtiyaçlara cevapverebilmek için 3 farklı modelde bulunmaktadır.

- Etkili bariyer sağlar.
- Kolay ve hızlı uygulanır.
- Kamera başlığının ve kablosunun ömrünü uzatır.

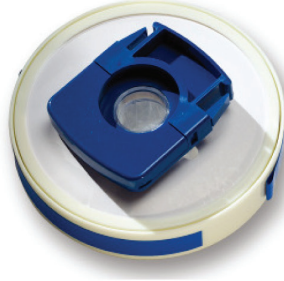

Kapalı kamera kılıfı.



Sitandard kamera kılıfı.



Katlanmış kamera kılıfı.

KAMERA KILIFI

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	PAKETLEME
FCS125000	Disposable camera sleeve	20 Adet/Kutu
FCS225000	Closed camera sleeve	20 Adet/Kutu
FCS525000	Folded camera sleeve	20 Adet/Kutu

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:




Camera Sleeves

CAMERA SLEEVES

Unimax disposable camera sleeve comes in 3 different models to satisfy various needs.

- Offers effective barrier
- Allows quick and easy application
- Prolongs the life of camera head and cable

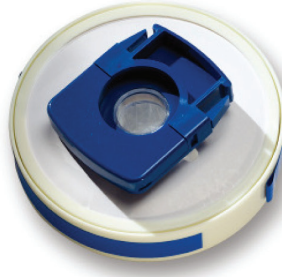

Standard camera sleeve



Closed camera sleeve



Folded camera sleeve

CAMERA SLEEVES

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGING
FCS125000	Disposable camera sleeve	20 pcs/box
FCS225000	Closed camera sleeve	20 pcs/box
FCS525000	Folded camera sleeve	20 pcs/box

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Buğulanmayı Önleyici Solüsyon

BUĞULANMAYI ÖNLEYİCİ SOLÜSYON ÖZELLİKLERİ

Uzun soluklu buğulanmayı önleyici formülü ile, Buğulanmayı Önleyici Solüsyon laporoskopik işlemler sırasında daha temiz görüntüleme sağlar.

- İki opsiyonu mevcuttur.
- Ürün içeriğinde 5 ml'lik şişesi ve 1adet sünger bulunmaktadır.
- Maliyet düşürücüdür.



BUĞULANMAYI ÖNLEYİCİ SOLÜSYON

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	PAKETLEME
FAF150000	Anti fog solution with alcohol	20 Adet/Kutu
FAF250000	Anti fog solution-alcohol free	20 Adet/Kutu

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Anti Fog

Anti Fog

With long lasting fog free formula, Unimax anti fog solution provides clear visualization for laparoscopic procedures.

- 2 options are available
- Comes with the package of on 5 ml bottle and one sponge
- Cost-effective



Anti Fog

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGING
FAF150000	Anti fog solution with alcohol	20 pcs/box
FAF250000	Anti fog solution-alcohol free	20 pcs/box

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Yankauer Emme Probu

YANKAUER EMME PROBU ÖZELLİKLERİ

- Dört farklı çeşidi mevcuttur; Gül uçlu hava delikli, Gül uçlu hava deliksiz, Düz uçlu hava delikli, Düz uçlu hava deliksiz.
- Sınıf VI tıbbi malzeme yönergelerine uygun üretilmiştir.



YANKAUER EMME PROBU

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	PAKETLEME
FYS130040	Yankauer suction probe rose tip without vent.	50 Adet/Kutu
FYS130050	Yankauer suction probe rose tip with vent.	50 Adet/Kutu
FYS230140	Yankauer suction probe straight tip without vent.	50 Adet/Kutu
FYS230150	Yankauer suction probe straight tip with vent.	50 Adet/Kutu

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Yankauer Suction Probe

Yankauer Suction Probe

- Available in four types: rose tip with vent, rose tip without vent, flat tip without vent.
- Made by medical grade resin which meets up to the requirement of Class VI



Yankauer Suction Probe

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGING
FYS130040	Yankauer suction probe rose tip without vent.	50 pcs/box
FYS130050	Yankauer suction probe rose tip with vent.	50 pcs/box
FYS230140	Yankauer suction probe straight tip without vent.	50 pcs/box
FYS230150	Yankauer suction probe straight tip with vent.	50 pcs/box

Manufactured by:



www.melekirmek.com - info@melekirmek.com

Distributed by:



LLETZ Elektrodu

LLETZ ELEKTRODU ÖZELLİKLERİ

Entegre edilmiş dizaynı daha güçlü kavis yapmasını sağlar.

Özel tekniği daha doğru radyanda kavis yapmasını sağlar.



- Farklı çeşitleri ve farklı ebatları mevcuttur.
- Tekrar kullanılabilir özelliği muadillerine nazaran daha uygun fiyatlıdır.
- İşlem sırasında elektrodun özel dizaynı düşmeyi önler.
- Özel yalıtımı elektroda doku yapışmasını önler.

LLETZ ELEKTRODU

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	PAKETLEME
FLE110050	Disposable Loop electrode 10mm*5mm	50 Adet/Kutu
FLE110100	Disposable Loop electrode 10mm*10mm	50 Adet/Kutu
FLE115080	Disposable Loop electrode 15mm*8mm	50 Adet/Kutu
FLE115100	Disposable Loop electrode 15mm*10mm	50 Adet/Kutu
FLE115120	Disposable Loop electrode 15mm*12mm	50 Adet/Kutu
FLE115150	Disposable Loop electrode 15mm*15mm	50 Adet/Kutu
FLE120080	Disposable Loop electrode 20mm*8mm	50 Adet/Kutu
FLE120100	Disposable Loop electrode 20mm*10mm	50 Adet/Kutu
FLE120120	Disposable Loop electrode 20mm*12mm	50 Adet/Kutu
FLE120150	Disposable Loop electrode 20mm*15mm	50 Adet/Kutu
FLE120200	Disposable Loop electrode 20mm*20mm	50 Adet/Kutu
FLE125150	Disposable Loop electrode 25mm*15mm	50 Adet/Kutu
FLE210100	Disposable square electrode 10mm*10mm	50 Adet/Kutu
FLE305070	Disposable electrode ball 5mm/7cm	50 Adet/Kutu
FLE305050	Disposable electrode ball 5mm/13.5cm	50 Adet/Kutu
FCB109120	Cone Biopsy Excisor-Small	50 Adet/Kutu
FCB112200	Cone Biopsy Excisor-Medium Extend	50 Adet/Kutu
FCB115180	Cone Biopsy Excisor-Large	50 Adet/Kutu
FCB112150	Cone Biopsy Excisor-Medium	50 Adet/Kutu
FEF100700	Disposable blade electrode 7cm	50 Adet/Kutu
FEF101500	Disposable blade electrode 15cm	50 Adet/Kutu
FEF101250	Disposable blade electrode 12.5cm	50 Adet/Kutu
FEN100700	Disposable needle electrode 7cm	50 Adet/Kutu
FEN200700	Disposable needle electrode-45 degree angle 7 cm	50 Adet/Kutu

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com


Distributed by:



Lletz Electrodes

Lletz Electrodes

- Comes in various types and different sizes
- Integrated design ensures robust loop support
- Special technique ensures accurate loop radian
- Reusable performance with much friendly price
- Unique design of the ball electrode prevents the ball from falling off during procedure
- Special coating ensures no adhesion of the ball electrode

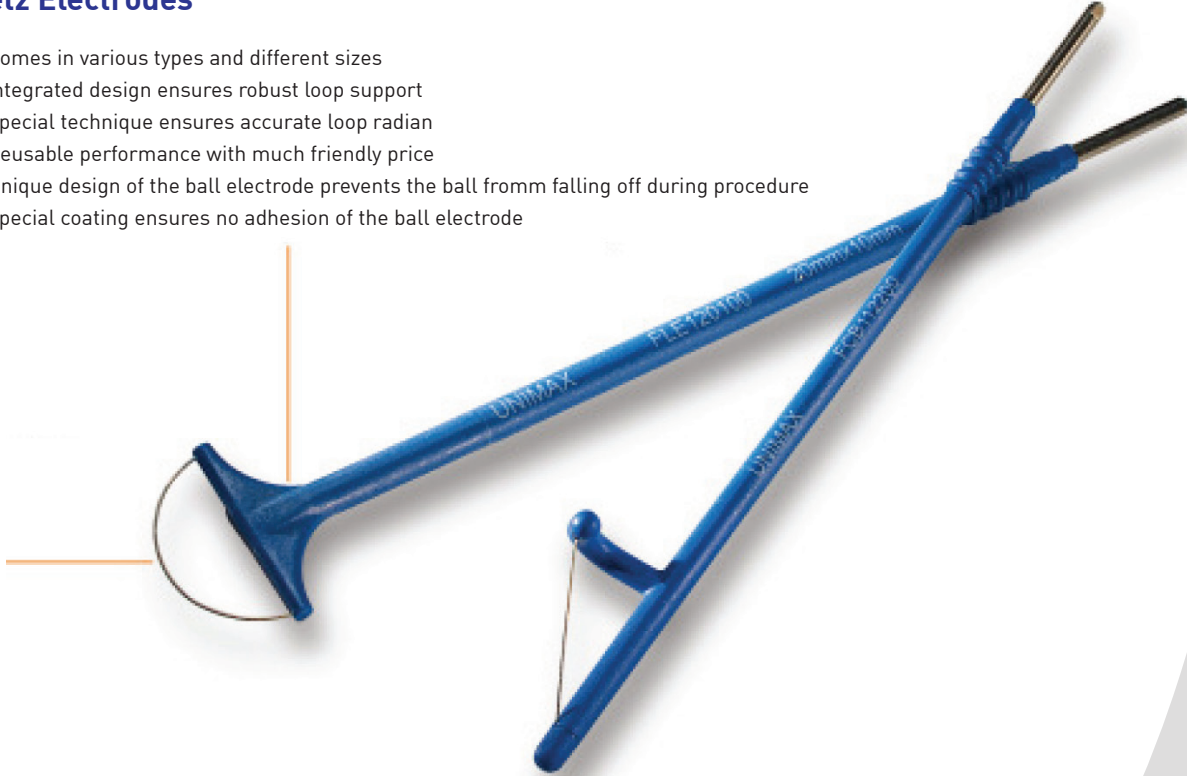

Lletz Electrodes

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGING
FLE110050	Disposable Loop electrode 10mm*5mm	50 pcs/box
FLE110100	Disposable Loop electrode 10mm*10mm	50 pcs/box
FLE115080	Disposable Loop electrode 15mm*8mm	50 pcs/box
FLE115100	Disposable Loop electrode 15mm*10mm	50 pcs/box
FLE115120	Disposable Loop electrode 15mm*12mm	50 pcs/box
FLE115150	Disposable Loop electrode 15mm*15mm	50 pcs/box
FLE120080	Disposable Loop electrode 20mm*8mm	50 pcs/box
FLE120100	Disposable Loop electrode 20mm*10mm	50 pcs/box
FLE120120	Disposable Loop electrode 20mm*12mm	50 pcs/box
FLE120150	Disposable Loop electrode 20mm*15mm	50 pcs/box
FLE120200	Disposable Loop electrode 20mm*20mm	50 pcs/box
FLE125150	Disposable Loop electrode 25mm*15mm	50 pcs/box
FLE210100	Disposable square electrode 10mm*10mm	50 pcs/box
FLE305070	Disposable electrode ball 5mm/7cm	50 pcs/box
FLE305050	Disposable electrode ball 5mm/13.5cm	50 pcs/box
FCB109120	Cone Biopsy Excisor-Small	50 pcs/box
FCB112200	Cone Biopsy Excisor-Medium Extend	50 pcs/box
FCB115180	Cone Biopsy Excisor-Large	50 pcs/box
FCB112150	Cone Biopsy Excisor-Medium	50 pcs/box
FEF100700	Disposable blade electrode 7cm	50 pcs/box
FEF101500	Disposable blade electrode 15cm	50 pcs/box
FEF101250	Disposable blade electrode 12.5cm	50 pcs/box
FEN100700	Disposable needle electrode 7cm	50 pcs/box
FEN200700	Disposable needle electrode-45 degree angle 7 cm	50 pcs/box

Manufactured by:



www.melekirmek.com - info@melekirmek.com

Distributed by:



Endometrial Hücre Örnekleyicisi

ENDOMETRIAL HÜCRE ÖRNEKLEYİCİSİ ÖZELLİKLERİ

- İdeal ölçüde sipesimen toplarımını sağlar.
- Maliyet düşürücüdür.



Yuvarlak ucu giriş kolaylığı sağlar.

Yeterli sertliği daha güvenli giriş sağlar.

ENDOMETRIAL HÜCRE ÖRNEKLEYİCİSİ

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	PAKETLEME
FEM103000	Endometrial hücre örnekleyici 3mm	25 Adet/Kutu
FEM103600	Endometrial hücre örnekleyici 3.6mm	25 Adet/Kutu

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com


Distributed by:



Endometrial Cell Sampler

Endometrial Cell Sampler

- Round tip endometrial cell sampler increases patient comfort on insertion
- Allows optimal specimen collection
- Cost-effective

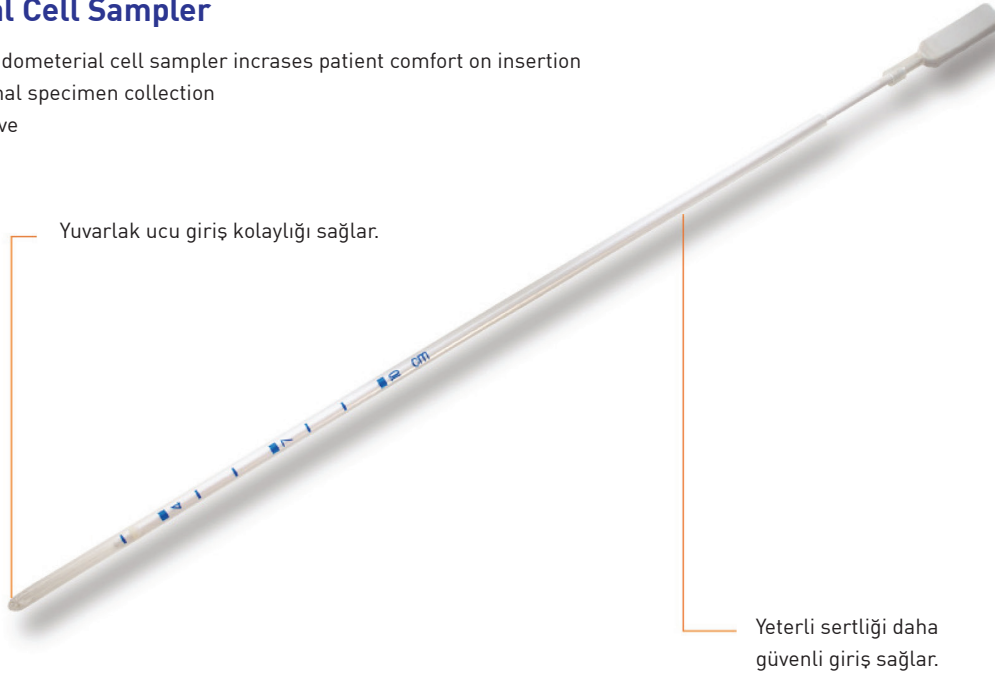

Endometrial Cell Sampler

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGING
FEM103000	Endometrial hücre örnekleme 3mm	25 pcs/box
FEM103600	Endometrial hücre örnekleme 3.6mm	25 pcs/box

Manufactured by:



www.melekirmek.com - info@melekirmek.com

Distributed by:



Easy Knot-Damar Düğümleyicisi



Easy Knot dünyaca ünlü cerrah Dr. Alien W. Chin tarafından dizayn edilmiştir. Bu özel alet laparoskopik ameliyatlarda geniş damarları kapatmak için kullanılmaktadır.

Easy Knot-Damar Düğümleyicisi

- Kullanımı kolay
- Operasyon sırasında geniş bir damarın 3 dakikaya kadar kontrolünü sağlar
- Normal kan basıncından fazla olan geniş damar basıncına karşı dayanıklı yapıya sahiptir.
- Gözle görülür şekilde operasyon maliyetini azaltır.



Easy Knot-Damar Düğümleyicisi

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	PAKETLEME
FEK100000	Ligating loop with easy knot	10 adet / kutu

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com

Distributed by:



Easy Knot



Unimax Easy knot is a novel knot applier designed by the world-noted surgeon, Dr. Alien W. Chin. This brilliant device offers a secure and cost-effective option for the ligation of large vessels in laparoscopic surgery

Easy Knot

- Easy to use
- Effective and efficient; averagely 3 minutes for the control of a big vessel
- Secure knot; withstands a vascular pressure higher than ordinary blood pressure
- Remarkably reduces operation cost.



Easy Knot

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGING
FEK100000	Ligating loop with easy knot	10 pcs / box

Manufactured by:



www.melekirmak.com - info@melekirmak.com


Distributed by:



Melekırmak Monolene Mesh

MELEKIRMAK MONOLENE MESH ÖZELLİKLERİ

- Melekırmak Monolene Mesh, bileşiminde sentetik doğrusal Poly-Olefin (c3 h6) ile özdeş, Polypropylene örgülü filamentlerden oluşmaktadır. Melekırmak Monolene Mesh, boyasız olarak, cerrahi işlemlerde kullanılmak üzere kare veya dikdörtgen gibi çeşitli şekillerde bulunmaktadır.
- Melekırmak Monolene Mesh yaklaşık olarak 0.5 mm kalınlığındadır.
- Melekırmak Monolene Mesh, her bir lifin (fibrin) kavşak - bağlantı noktalarından birleştirilmesiyle örgülenmiş olduğu için her yöne elastikiyet sağlamaktadır.
- Bu fiber bağlantıları daha sert metalik meshlerde görülen kullanımdan dolayı ortaya çıkan yıpranmaya karşı direnç sağlamaktadır.
- Bu çift yönlü uzatılabilir yapı, vücutta oluşabilecek çeşitli gerilmelere adapte olmasını sağlamaktadır.
- Bu materyalin, kullanıldığında en az derecede reaktif olduğu ve uzun bir süre dayanıklılığı kliniksel olarak rapor edilmiştir.
- Melekırmak Monolene Mesh`in patlama dayanıklılığı 12 kg/cm` ile 14 kg/cm2 arasındadır.

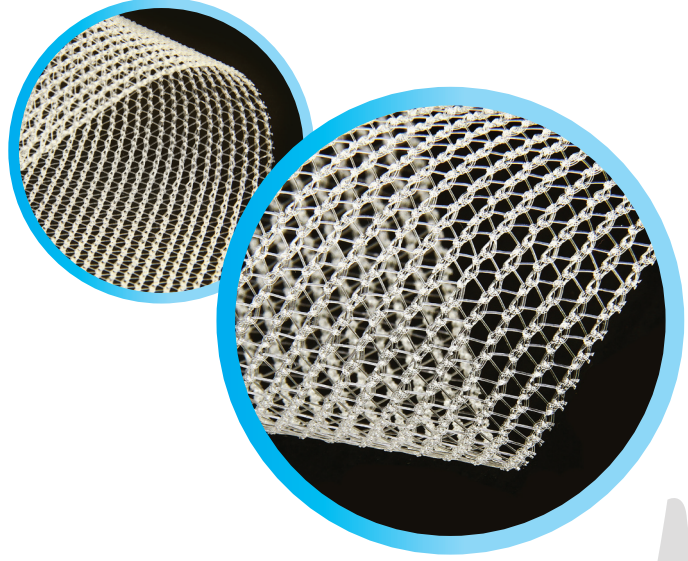


MELEKIRMAK MONOLENE MESH

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	PAKETLEME
MMP - 6X12	6 cm X 12 cm	5 adet / kutu
MMP - 7,5X15	7,5 cm X 15 cm	5 adet / kutu
MMP - 10X15	10 cm X 15 cm	5 adet / kutu
MMP - 15X15	15 cm X 15 cm	5 adet / kutu
MMP - 30X30	30 cm X 30 cm	5 adet / kutu



Melekirmak Monolene Mesh

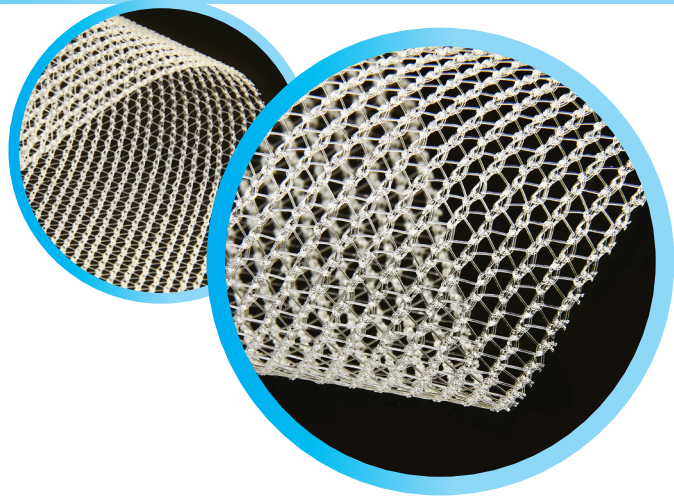

MELEKIRMAK MONOLENE MESH DESCRIPTION

- MELEKIRMAK MONOLENE MESH is constructed of knitted filaments of extruded Polypropylene, a synthetic linear polyolefin (C₃H₆) identical in composition.
- MONOLENE MESH is available undyed in a variety of square and rectangular sizes for surgical procedures. The mesh is approximately 0.5mm thick.
- MELEKIRMAK MONOLENE MESH is knitted by a process which interlinks each fiber junction and provides for elasticity in both directions.
- This construction permits the mesh to be cut into any desired shape or size without unraveling.
- The fiber junctions are not subject to the same work fatigue exhibited by more rigid metallic meshes. This bidirectional extendable property allows adaptation to various stresses encountered in the body.
- This material, when used has been reported to be minimally reactive and to retain its strength for an indefinite period in clinical use. The mesh has high burst strength of 12 kg/cm². to 14 kg/cm².

MELEKIRMAK MONOLENE MESH

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGING
MMP - 6X12	6 cm X 12 cm	5 pcs/box
MMP - 7,5X15	7,5 cm X 15 cm	5 pcs/box
MMP - 10X15	10 cm X 15 cm	5 pcs/box
MMP - 15X15	15 cm X 15 cm	5 pcs/box
MMP - 30X30	30 cm X 30 cm	5 pcs/box